



1 Aufgetragener *paste opaque*



2 Auflegen von *opaque dentin*



3 Zurückgeschnittenes *dentin* (cutback)

Individuelle Schichtung Sakura Interaction




4 Eingelegtes *action i-dentin*



5 Anlegen unterschiedlicher *x-tra incisals*



6 *incisal* Rahmen

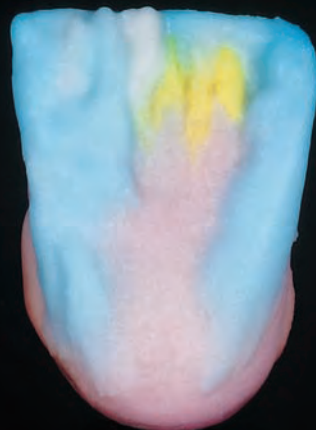

7 Inzisale Wechselbeschichtung




8 Mit *incisal* komplettiert



9 Palatinale Kuvertur

StratoPlus/StratoPress (Allgemeines Brennprogramm)		Pasten-Opaker	1. Dentin	2. Dentin	Glanz
Vorwärm- bzw. Starttemperatur	(°C)	400	450	450	450
Vortrocken- und Vorwärmzeit	(min)	7	5	4	4
Temperaturanstieg	(°C/min)	60	60	60	60
Endtemperatur	(°C)	920	850	845	810
Haltezeit mit Vakuum	(min)	1	1	1	
Haltezeit ohne Vakuum	(min)	1	1	1	1,5
Vakuumstart	(°C)	400	450	450	-
Vakuumstopp	(°C)	920	850	845	-

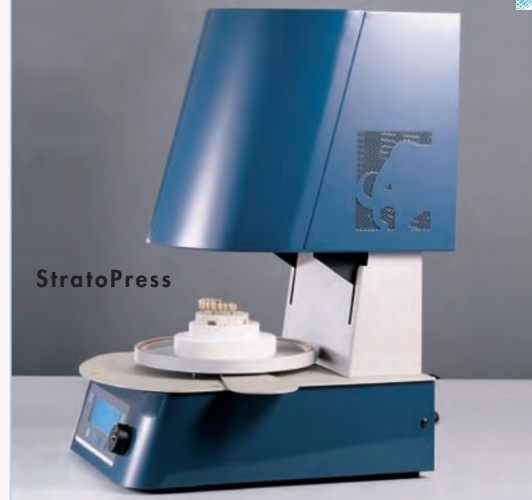

Wichtiger Hinweis:


Die angegebenen Brenntemperaturen sind Richtwerte. Abweichungen davon sind wegen unterschiedlicher Ofenleistungen möglich und müssen gegebenenfalls angepasst werden.

Auswahl der Gerüste (Indikation):

Sakura Interaction ist die niedrigexpandierende, niedrigschmelzende Dentalkeramik für Zirkonoxid-Gerüste. Sakura Interaction lässt sich problemlos auf Zirkonoxid-Gerüste in einem WAK-Bereich von 10,0 bis 10,6 µm/m.K (25-500°C) aufbrennen.

Kontraindikation:

Nicht verwenden wenn eine Allergie gegen einen der Bestandteile bekannt ist.

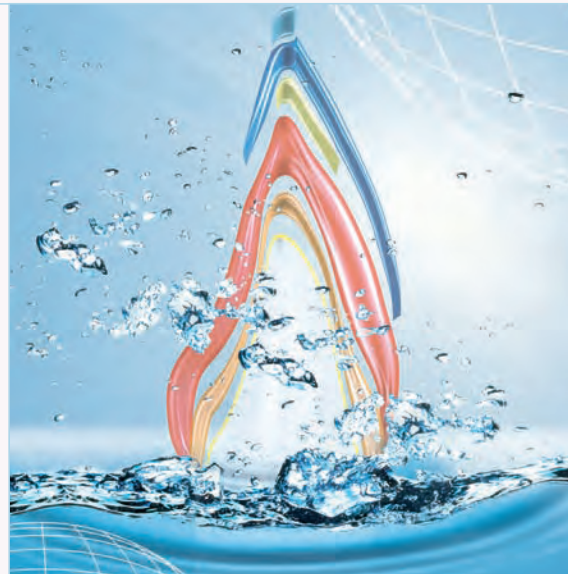

Vorbehandlung der Unterstruktur:

Beachten Sie bei der Vorbehandlung der Unterstrukturen bitte die Hinweise in der Betriebsanleitung des Herstellers.

paste opaque	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4			
opaque dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4			
dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4			
action i-dentin	1A2		3A4			1B2		3B4		1C2		3C4		1A2		1B2		1C2	
x-tra incisal	x-tra i blue/x-tra i red/x-tra i grey/x-tra i orange/x-tra i clear																		
	x-tra i bright/x-tra i medium/x-tra i dark																		
incisal	58	59	60	57	59	60	59	60	59	60	59	60	59	60	59	60	59		

Elephant Dental B.V.
Verlengde Lageweg 10
1628 PM Hoorn, Niederlande
Tel. +31 229 25 90 00
Fax +31 229 25 90 99
E-mail info@elephant.nl
www.elephant-dental.com

Elephant Dental GmbH
Tibarg 40
22459 Hamburg
Gratis Tel. 08 00 - 865 55 37
Gratis Fax 08 00 - 35 37 42 68 (Elephant)
E-mail hamburg@eledent.de
www.elephant-dental.com
Technik-Hotline
018 05 - 35 37 42 68
(Elephant) 0,12 €/Min.

Elephant



dental health products

Typ 1 Dentalkeramik Made in Holland ISO 6872

CE 0344 01-mar-2005