



1 *paste opaque* uygulaması



2 *opaque dentin* uygulaması



3 *dentin insizalinin* kesilip kısaltılması

Standart derecede eriyen alaşım üzerinde Antagon Interaction'ın kişisel tabakalaması



4 *action i-dentin* (flüoresan insizal dentin) uygulaması



5 Farklı *x-tra incisal* uygulanması



6 Kenarların *incisal* kaplanması



7 Sandwich teknik kullanılarak, insizal ile tabakalama




8 *Incisal* ile tamamen kaplama



9 Bitirilmiş, glazürü yapılmış kron

StratoPlus/StratoPress ( Genel pişirme programı )	1. paste opaque	2. paste opaque	basamak porseleni	1. dentin	2. dentin	glazür	düzelme porseleni
ön ısıtma ve başlangıç ısısı: (°C)	400	400	500	500	500	500	500
ön kurutma ve ön ısıtma süreleri (dakika)	7	7	4	5-7	3-5	4	3-5
artış oranı: (°C/dakika)	60	60	60	60	60	60	60
final ısısı: (°C)	915	910	895	895	890	885	830-850
tutma süresi (dakika)	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
vakum açık: (°C)	400	400	500	500	500	-	500
vakum kapalı (°C)	915	910	895	895	890	-	830-850

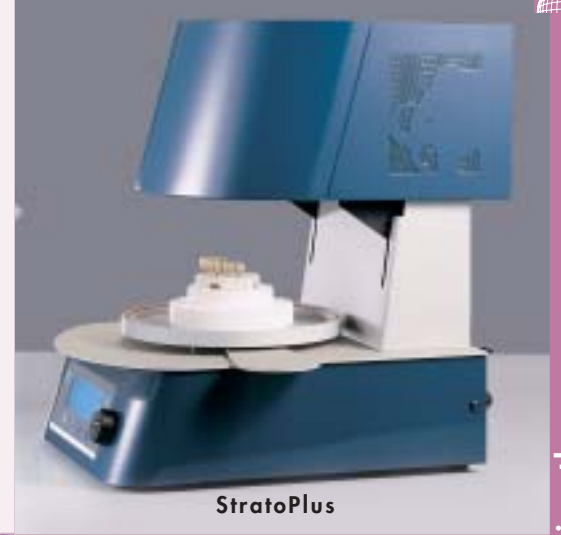

StratoPlus

## Seramik alaşımı seçimi:

Seramik alaşımı üzerinde Antagon Interaction'ın problemsiz pişirilmesi, 13.8 ile 14.9 µm/m.K (25-500°C) arasındaki bir WAK aralığında (ısısal genleşme katsayısı) mümkündür.


**Hızlı** soğutma 14.0 µm/m.K-0 dakika'da yapılır.

**Normal** soğutma 14.3 µm/m.K-maksimum 2 dakika'da yapılır.

**Yavaş** soğutma 14.4 µm/m.K-minimum 5-7 dakika'da yapılır.

## Önemli not:

Belirtilen pişirme ısıları hedef değerlerdir. Isılar, bir seramik fırından diğerine değişebilir ve ısı ayarları uygun olarak fırına göre adapte edilmelidir.

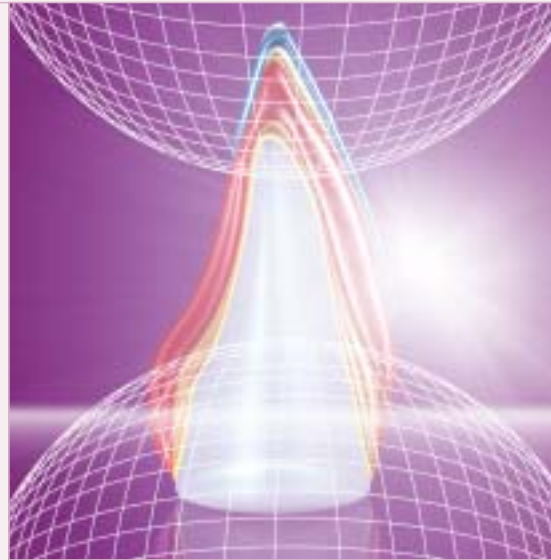

Alaşım	WAK(ısısal genleşme katsayısı) (25-500°C)	Antagon Interaction soğutma
Orion UX	13,8	Hızlı (0 dakika)
Orion WX	13,8	Hızlı (0 dakika)
Orion Vesta	13,8	Hızlı (0 dakika)
Bermudent H	14,0	Hızlı (0 dakika)
Orion UX Plus	14,1	Normal (2 dakika)*
Orion UWX	14,1	Normal (2 dakika)*
Orion GX	14,1	Normal (2 dakika)*
Orion Isis Plus	14,2	Normal (2 dakika)*
Biogold Plus	14,3	Normal (2 dakika)#
Bermudent Y	14,3	Normal (2 dakika)#
Biogold AN	14,3	Normal (2 dakika)#
Orion E	14,4	Yavaş (5 dakika)
Orion Virgo P	14,5	Yavaş (5 dakika)
Orion Argos	14,7	Yavaş (7 dakika)

\* Ya da, bu mümkün değilse, hızlıca # Ya da, bu mümkün değilse yavaşca

paste opaque	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
opaque dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
action i-dentin	1A2	3A4			1B2	3B4	1C2	3C4	1A2	1B2	1C2					
x-tra incisal	x-tra i blue/x-tra i red/x-tra i grey/x-tra i orange/x-tra i clear															
	x-tra i bright/x-tra i medium/x-tra i dark															
incisal	58	59	60	57	59	60	59	60	59							

**i** Teknik destek personelimiz seramik fırınınızın pişirme programında size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

Elephant Dental B.V.  
Verlengde Lageweg 10  
1628 PM Hoorn, Hollanda  
Tel: +31 229 25 90 00  
Fax: +31 229 25 90 99  
E-mail: export@elephant.nl  
www.elephant-dental.com

Elephant



dental health products

CE 0344 01-jun-2004