



1 Η παστά *opaque* τοποθετημένη



2 Τοποθετήστε την *opaque dentin*



3 Δόμηση της οδοντίνης και αφαίρεση υλικού (μεθ. cutback)

Antagon Interaction. Περιληπτικές οδηγίες χρήσεως.



4 Τοποθετημένη η ενεργή επίστρωση *action i-dentin*




5 Τοποθετούνται οι διαφορετικές έξτρα αδαμαντίνες



6 Σκελετός αδαμαντίνης (διαφάνεια)



7 Τεχνική sandwich με την αδαμαντίνη

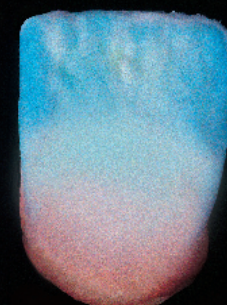


8 Πλήρης επικάλυψη με αδαμαντίνη



9 Τελειωμένη γυαλισμένη στεφάνη

StratoPlus/ StratoPress	1ο οραquer πάστα	2ο οραquer πάστα	αυχένος	1ο οδοντήν	2ο οδοντήν	Glaze	επιδιο- ρθώσεις
Προθέρμανση η αρχική θερμοκρασία (°C)	400	400	500	500	500	500	500
Στέγνωμα και προθέρμανση (min)	7	7	4	5-7	3-5	4	3-5
Ρυθμός αύξησης θερμοκρασίας (°C/min)	60	60	60	60	60	60	60
Τελική θερμοκρασία (°C)	915	910	895	895	890	885	830-850
Χρόνος παραμονής (min)	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
Αρχική θερμοκρασία vacuum (°C)	400	400	500	500	500	-	500
Τελική θερμοκρασία vacuum (°C)	915	910	895	895	890	-	830-850

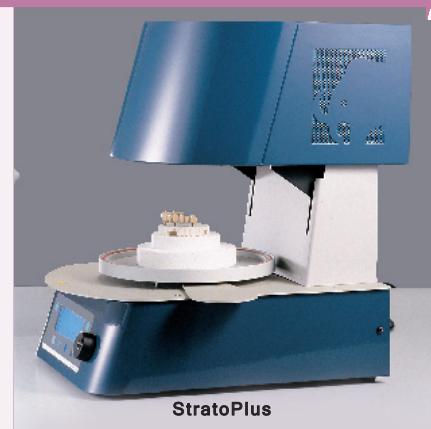

StratoPlus

Εκλογή κεραμικού κράματος:

Το ψήσιμο της Antagon Interaction γίνεται χωρίς προβλήματα σε ένα εύρος WAK (θερμικός συντελεστής διαστολής) από 13.8 έως 14.9μm/m.K (20-500°C)


Γρήγορη ψύξη στα 14.0μm/m.K-0 λεπτά

Κανονική ψύξη στα 14.3μm/m.K-2 λεπτά

Αργή ψύξη στα 14.4μm/m.K-5-7 λεπτά

Σημείωση:

Οι θερμοκρασίες ψήσιματος είναι σε ιδανικές συνθήκες. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από φούρνο σε φούρνο και ίσως να απαιτούνται ρυθμίσεις ανάλογα το μοντέλο του φούρνου.

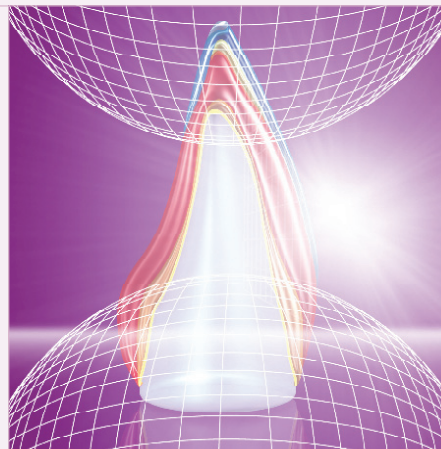

Κράμα	WAK (25-500°C)	Ψύξη Antagon Interaction
Orion UX	13,8	Γρήγορα (0 min.)
Orion WX	13,8	Γρήγορα (0 min.)
Orion Vest	13,8	Γρήγορα (0 min.)
Bermudent H	14,0	Γρήγορα (0 min.)
Orion UX Plus	14,1	Κανονικά (2 min.)*
Orion UWX	14,1	Κανονικά (2 min.)*
Orion GX	14,1	Κανονικά (2 min.)*
Orion Isis Plus	14,2	Κανονικά (2 min.)*
Biogold Plus	14,3	Κανονικά (2 min.)#
Bermudent Y	14,3	Κανονικά (2 min.)#
Biogold AN	14,3	Κανονικά (2 min.)#
Biogold Interaction	14,3	Κανονικά (2 min.)#
Biogold Pure	15,0	Κανονικά (4 min.)!
Orion E	14,4	Αργά (5 min.)
Orion Argos	14,7	Αργά (7 min.)

* O, se non è possibile: veloce # O, se non è possibile: lento
! Ανεξάρτητα του υψηλού TCE Ψύχεται: κανονικά λόγω της ειδικής του σύνθεσης.

paste opaque	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
opaque dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
action i-dentin	1A2		3A4		1B2		3B4		1C2		3C4	1A2	1B2	1C2		
x-tra incisal	x-tra i blue/x-tra i red/x-tra i grey/x-tra i orange/x-tra i clear															
	x-tra i bright/x-tra i medium/x-tra i dark															
incisal	58	59	60	57	59	60	59	60	59							

1 Το εξειδικευμένο προσιπικό είναι πρόθυμο να απαντήσει σε κάθε απορία σχετική με τους χρόνους ψήσιματος και τις θερμοκρασίες ανάλογα με τον φούρνο σας.

Elephant Dental B.V.
Verlengde Lageweg 10
1628 PM Hoorn, The Netherlands
Tel.: +31 229 25 90 00
Fax: +31 229 25 90 99
E-mail: export@elephant.nl
Internet: www.elephant-dental.com

Novadental E.Π.Ε
Βεραντζου 23
104 32 Αθήνα
Τηλ.: 210 523 3307
Fax: 210 523 7657
E-mail: novadental@ath.forthnet.gr

Elephant



dental health products

CE 0344 15-oct-2004