



1 Pâte opaque appliquée



2 Application de l'opaque dentin



3 Dentin réduite (cutback)

Construction individuelle par couches d'Antagon Interaction sur alliage à fusion normale



4 Action *i-dentin* insérée



5 Application des différentes *x-tra incisals*



6 Application de l'*incisal*



7 Couches incisales alternées



8 Finition avec *incisal*



9 Couronne achevée, glaçage effectué

StratoPlus (Protocole général de cuisson)	1. Opaque en pâte	2. Opaque en pâte	Masse d'épaulement	1. Dentine	2. Dentine	Brillant	Masse de correction
Température de préchauffage ou initiale (°C)	400	400	500	500	500	500	-
Temps de préséchage et de préchauffage (min)	7	7	4	5-7	3-5	4	-
Élévation de température (°C/min)	60	60	60	60	60	60	-
Température finale (°C)	915	910	895	895	890	885	-
Temps de cuisson (min)	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	-
Début du vide (°C)	400	400	500	500	500	-	-
Fin du vide (°C)	915	910	895	895	890	-	-



StratoPlus

Choix de l'alliage cuit:

Antagon Interaction peut se cuire sans problème sur des alliages cuits, dans une plage de coefficient de dilatation thermique (WAK) de 13,8 à 14,9 $\mu\text{m}/\text{mk}$ (de 20 à 500 °C).


Refroidissement rapide jusque 14,0 $\mu\text{m}/\text{mk}$ - 0 min.

Refroidissement normal jusque 14,3 $\mu\text{m}/\text{mk}$ - max. 2 min.

Refroidissement lent à partir de 14,4 $\mu\text{m}/\text{mk}$ - 5-7 min.

Remarque importante:

Les températures de cuisson ne sont que des valeurs indicatives. Chaque four étant différent, il est possible que des températures différentes doivent être appliquées.

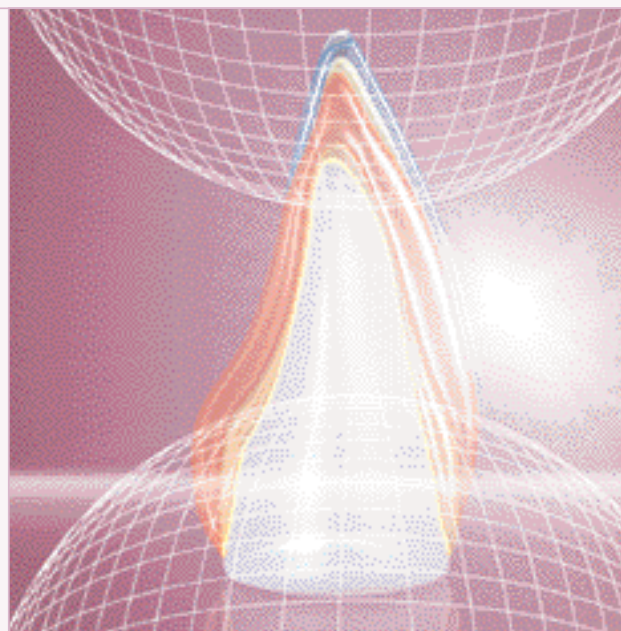

Phase de refroidissement:

- *BioGold Plus*: chaque phase de cuisson doit être refroidie normalement à lentement (de 2 à 5 min.).
- *Bermudent Y*: chaque phase de cuisson doit être refroidie normalement à lentement (de 2 à 5 min.).
- *Bermudent H*: chaque phase de cuisson doit être refroidie rapidement (0 min.).
- *Orion WX*: chaque phase de cuisson doit être refroidie rapidement (0 min.).
- *Orion Argos*: chaque phase de cuisson doit être refroidie lentement (de 5 à 7 min.).

paste opaque	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
opaque dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
action i-dentin	1A2	3A4	1B2	3B4	1C2	3C4	1A2	1B2	1C2							
x-tra incisal	x-tra i blue/x-tra i red/x-tra i grey/x-tra i orange/x-tra i clear															
	x-tra i bright/x-tra i medium/x-tra i dark															
incisal	58	59	60	57	59	60	59	60	59	60	59	60	59	60	59	60

i Nos collaborateurs du service de Support technique seront heureux de vous conseiller le protocole de cuisson le mieux adapté à votre four à céramique.

Elephant Dental B.V.
Verlengde Lageweg 10 1628 PM Hoorn, Pays-Bas
Tel: +31 229 25 90 00
Fax: +31 229 25 90 99
E-mail: export@elephant.nl
Internet:
www.elephant-dental.com

Elephant



dental health products