

margin
Gebruiksaanwijzing



Verkrijgbaar in de volgende kleuren
margin 1A2, 3A4, 1B2, 3B4, 1C2, 3C4 & *Booster margin correction* Bright, Medium & Dark

Gebruiksaanwijzing schoudermassa's

Deze gebruiksaanwijzing heeft betrekking op de bij de Carrara Interaction-keramiek behorende schoudermassa's.

Voor de verwerking van de Standard Carrara Interaction-massa's verwijzen we naar de gebruiksaanwijzing voor Carrara Interaction.



1 De stomp verzegelen

1 De stomp verzegelen:

- Breng een gipsverharder op de stomp aan en laat deze goed drogen.



2 De stomp separeren

2 De stomp separeren:

- Breng een keramiekseparatiemiddel op de stomp aan en blaas deze droog met perslucht.


Kleur	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
<i>margin</i>	1A2		3A4	50% 3A4 & 50% Booster	Booster	1B2		3B4	50% 3B4 & 50% Booster	1C2		3C4	50% 3C4 & 50% Booster	1A2	3A4	3C4
<i>margin correction</i>	Bright, Medium & Dark															




3a Aanbrengen van *margin*

3 Aanbrengen van *margin* voor de eerste schoudermassabakfase:

- Meng de desbetreffende *margin* (zie het kleuren schema op de vorige pagina) met behulp van *margin liquid* tot een crèmeachtige consistentie.
- Breng de *margin*-massa op de gebruikelijke wijze aan. Condenseer goed en blaas het desgewenst vóór verdere verwerking droog met een föhn.

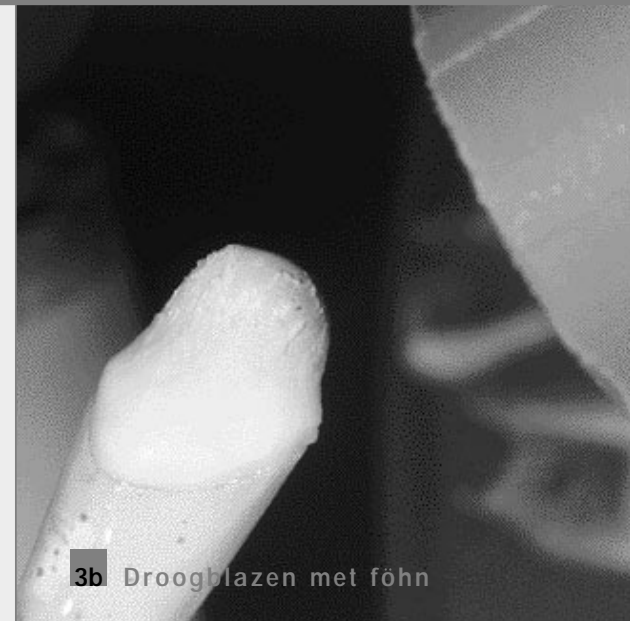

3b Droogblazen met föhn

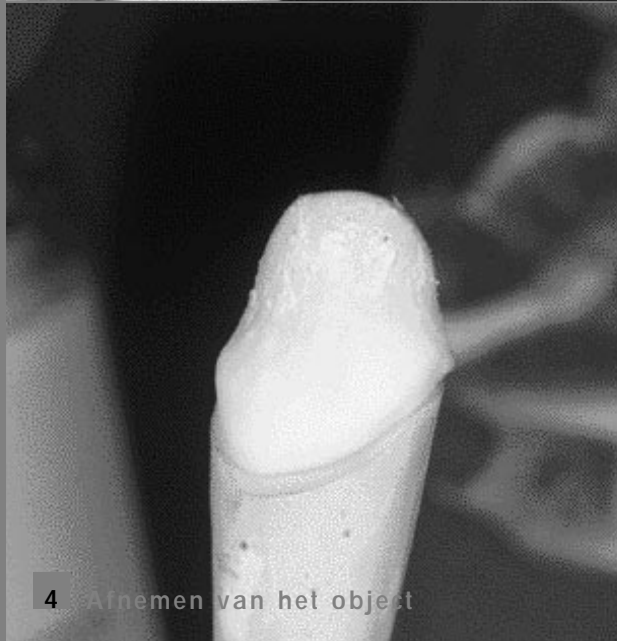

4 Afnemen van het object

4 Afnemen van het object:

- Neem het object van de stomp.
- Bak de keramiek volgens het bakschema.

4 Bakschema voor de eerste schoudermassabakfase:

Drogen	Starttemp.	Vacuümstart	Opwarm-snelheid
8–10 Min.	450°C	450°C	55–80°C/Min.
Eindtemp.	Baktijd	Optische verschijning	
860°C	3 Min.#	Matglans	

2 min. met vacuüm en 1 min. zonder vacuüm



5 Schouder na de bakfase


5 Aanbrengen van *margin* voor de tweede schoudermassabakfase:

- Meng de desbetreffende *margin* met behulp van *margin liquid* tot een crèmeachtige consistentie.
- Breng de *margin*-massa op de gebruikelijke wijze aan. Condenseer goed en blaas het desgewenst vóór verdere verwerking droog met een föhn.
- Neem het object van de stomp.
- Bak de keramiek volgens het bakschema.

5 Bakschema voor de tweede schoudermassabakfase:

Drogen	Starttemp.	Vacuümstart	Opwarm-snelheid
8–10 Min.	450°C	450°C	55–80°C/Min.
Eindtemp.	Baktijd	Optische verschijning	
860°C	2 Min.#	Matglans	

1 min. met vacuüm en 1 min. zonder vacuüm

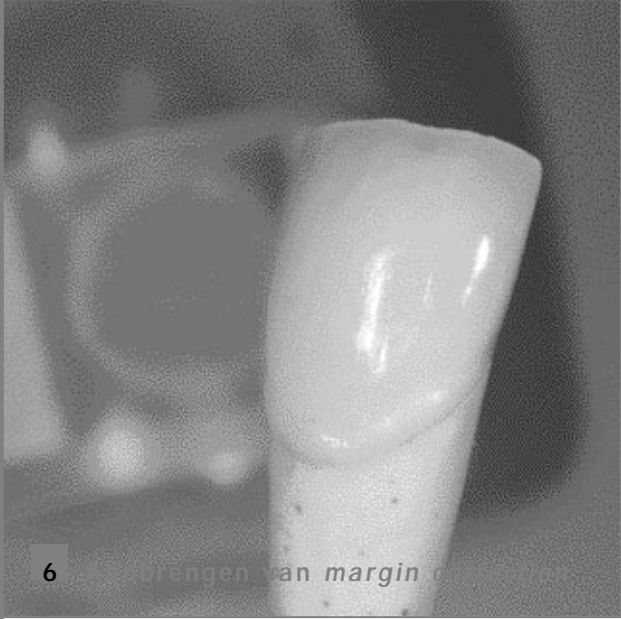

6 Verwerking:

Corrigeren van de keramiëschouder met *margin correction*:

- Meng de massa net als de *margin* met behulp van *margin liquid* tot een crèmeachtige consistentie.
- Breng de massa op de te corrigeren plaats aan en condenseer goed. Blaas de massa vóór verdere verwerking droog met een föhn.
- Neem het object van de stomp.
- Bak de keramiek volgens het bakschema.
- Na het bakproces dient de correctielaag bij voorkeur mechanisch met siliconenpolijstinstrumenten en diamantpasta gepolijst te worden.

Foto's: ZTM Jan Schünemann (Bielefeld, Duitsland)

6 Bakschema voor de *margin corrections* Bright, Medium, Dark

Drogen	Starttemp.	Vacuümstart	Opwarm-snelheid
6 Min.	450 °C	450 °C	55–80 °C/Min.
Eindtemp.	Baktijd	Optische verschijning	
795 °C	2 Min. zonder vacuüm	Zijdeglans	

Na het bakproces dient de correctielaag bij voorkeur mechanisch gepolijst te worden.

6 Brengen van *margin* o

Carrara Interaction: Dé opbakkeramiek voor alle toepassingen in het Carrara Systeem.


Opbakkeramiek






 Carrara Interaction

Universal-legeringen




 Carrara PdF
Hoog goudgehalte

 Cera F  Cera R plus
Goud-gereduceerd

 Cera E
Palladiumzilver

Perskeramiek



 Carrara Press
Volkeramiek

Legeringen en perskeramiek kunnen met behulp van één keramiek worden opgebakken: Carrara Interaction

Elephant

Wij ondersteunen uw succes.

Elephant Dental B.V.
Verlengde Lageweg 10
1628 PM Hoorn, Nederland
Tel. 0229 25 90 00
Fax 0229 25 90 99
E-mail info@elephant.nl
Internet www.elephant-dental.com

dental health products


0344

11-dec-2003