

Carrara Interaction action i-dentin

First dentin firing:

Drying	Starting temp.	Vacuum starting temp.
5-7 min.	450°C	450°C
Heatrate	Final temp.	Hold time
55-80°C/min.	835°C	1-2 min.

Second dentin firing:

Drying	Starting temp.	Vacuum starting temp.
3-5 min.	450°C	450°C
Heatrate	Final temp.	Hold time
55-80°C/min.	830°C	1-2 min.

Instructions for use of Carrara Interaction action i-dentin

Indication: The range of action i-dentin powders enables you to enhance the natural look of Carrara Interaction restorations. Depending on the desired colour effect, the powders can be used in pure form or together with transpa, incisal, x-tra incisal, dentin or action i-dentin.

Contraindications: Not suitable for use with Antagon Interaction and Sakura Interaction powders. **Use:** Use the Shadeguide to select the desired colour effect. Add Carving Liquid to the powder and continue mixing until a creamy consistency is achieved. Apply the mixture in layers. Depending on the indication, action i-dentin colours are fired during the first or second dentin firing. Colours correspond to the former Individual Colors.

1. Dentinbrand:

Trocknen	Starttemp.	Vakuümstart
5-7 min.	450°C	450°C
Aufheizrate	Endtemp.	Haltezeit
55-80°C/min.	835°C	1-2 min.

2. Dentinbrand:

Trocknen	Starttemp.	Vakuümstart
3-5 min.	450°C	450°C
Aufheizrate	Endtemp.	Haltezeit
55-80°C/min.	830°C	1-2 min.

Gebrauchsanleitung Carrara Interaction action i-dentin

Indikation: Das Sortiment der action i-dentin Massen, ermöglicht es Ihnen, das natürliche Erscheinungsbild Ihrer Restauration aus Carrara Interaction Massen gezielt zu verstärken. Abhängig vom gewünschten Farbeffekt können die Massen pur, mit transpa, incisal, x-tra incisal, dentin oder action i-dentin verwendet werden. **Kontraindikationen:** Nicht geeignet für Antagon Interaction und Sakura Interaction Massen. **Anwendung:** Mit Hilfe des Shadeguides den gewünschten Farbeffekt auswählen. Die zugeordnete Masse mit Carving Liquid zu einer sahnigen Konsistenz anrühren und schichten. action i-dentin Farben werden entsprechend dem Indikationsbereich beim ersten oder zweiten Dentinbrand gebrannt. Farben entsprechen den ehemaligen Individual Colors.

Eerste dentinebakfase:

Drogen	Starttemp.	Vacuümstart temp.
5-7 min.	450°C	450°C
Opwarmnelheid	Eindtemp.	Houdtijd
55-80°C/min.	835°C	1-2 min.

Tweede dentinebakfase:

Drogen	Starttemp.	Vacuümstart temp.
3-5 min.	450°C	450°C
Opwarmnelheid	Eindtemp.	Houdtijd
55-80°C/min.	830°C	1-2 min.

Gebruiksaanwijzing Carrara Interaction action i-dentin


Indicatie: Met het sortiment van de action i-dentin -massa's kunt u het natuurlijke uiterlijk van uw Carrara Interaction-restauraties versterken. Afhankelijk van het gewenste kleureffect kunnen de massa's puur, met transpa, incisal, x-tra incisal, dentin of action i-dentin worden gebruikt. **Contra-indicaties:** Niet geschikt voor Antagon Interaction- en Sakura Interaction-massa's. **Gebruik:** Kies m.b.v. de Shadeguide het gewenste kleureffect. Roer de bijbehorende massa aan met Carving Liquid tot een romige consistentie en breng de massa laagsgewijs aan. action i-dentin kleuren worden overeenkomstig het indicatiebereik bij de eerste of tweede dentinebakfase gebakken. De kleuren zijn gelijk aan die van de oude Individual Colors.

Carrara Interaction action i-dentin

Carrara Interaction action i-dentin



action i-dentin

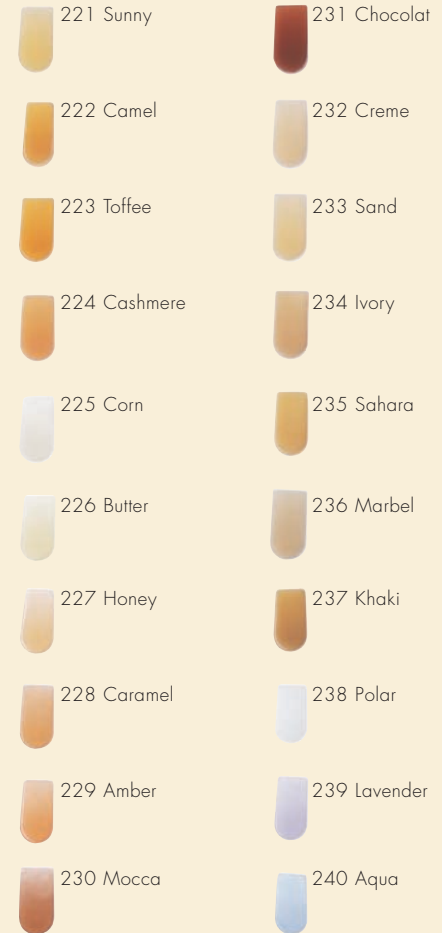

paste opaque	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
opaque dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
action i-dentin	1A2		3A4			1B2		3B4		1C2		3C4		1A2	1B2	1C2
	221 - 240 (for individual use)															
x-tra incisal	x-tra i blue/x-tra i red/x-tra i grey/x-tra i orange/x-tra i clear															
	x-tra i bright/x-tra i medium/x-tra i dark															
incisal	58	59	60	57	59	60	59	60	59	60	59	60	59	60	59	60

Carrara Interaction action i-dentin

Carrara Interaction action i-dentin

Première phase de cuisson de dentine:

Séchage	Temp. initiale	Temp. initiale sous vide
5-7 min.	450°C	450°C
Vitesse de chauff.	Temp. finale	Durée de maintien
55-80°C/min.	835°C	1-2 min.

Seconde phase de cuisson de dentine:

Séchage	Temp. initiale	Temp. initiale sous vide
3-5 min.	450°C	450°C
Vitesse de chauff.	Temp. finale	Durée de maintien
55-80°C/min.	830°C	1-2 min.

Mode d'emploi de Carrara Interaction action i-dentin

Indication: La gamme des masses action i-dentin vous permet de renforcer l'apparence naturelle de vos restaurations Carrara Interaction. Les masses peuvent être utilisées pures, avec transpa, incisal, xtra incisal, dentin ou action i-dentin, en fonction de l'effet de couleur désiré. **Contre-indications:** Ne convient pas aux masses Antagon Interaction et Sakura Interaction. **Utilisation:** Choisissez l'effet de couleur désiré à l'aide du guide Shadeguide. Mélangez la masse correspondante avec le Carving Liquid jusqu'à l'obtention d'une consistance crémeuse puis appliquez la masse couche par couche. Les couleurs action i-dentin sont cuites en première ou seconde phase de cuisson de dentine conformément à la plage d'indication. Les couleurs correspondent à l'ancien Individual Colors.

Cottura prima fase della dentina:

Essiccation	Temp. iniziale	Temp. iniziale vuoto
5-7 min.	450°C	450°C
Velocità di riscaldamento	Temp. finale	Temp. di cottura
55-80°C/min.	835°C	1-2 min.

Cottura seconda fase della dentina:

Essiccation	Temp. iniziale	Temp. iniziale vuoto
3-5 min.	450°C	450°C
Velocità di riscaldamento	Temp. finale	Temp. di cottura
55-80°C/min.	830°C	1-2 min.

Istruzioni per l'uso di Carrara Interaction action i-dentin

Indicazione: Con l'assortimento delle masse action i-dentin è possibile intensificare l'aspetto naturale dei restauri realizzati con Carrara Interaction. A seconda dell'effetto cromatico desiderato, le masse possono essere usate allo stato puro o con transpa, incisal, xtra incisal, dentin e action i-denti. **Controindicazioni:** Non è adatto per le masse Antagon Interaction e Sakura Interaction. **Utilizzo:** Scegliere il colore desiderato utilizzando lo Shadeguide. Mescolare la massa scelta con Carving Liquid fino ad ottenere un impasto a consistenza cremosa. Applicarlo in vari strati. In base all'indicazione, gli action i-dentin colori devono essere cotti nella prima o nella seconda fase di cottura della dentina. I colori corrispondono a quelli vecchi degli Individual Colors.

Primera fase de cocción de dentina:

Secado	Temp. inicial	Temp. inicial vacío
5-7 min.	450°C	450°C
Vel. de calentamiento	Temp. final	Tiempo de cocción
55-80°C/min.	835°C	1-2 min.

Segunda fase de cocción de dentina:

Secado	Temp. inicial	Temp. inicial vacío
3-5 min.	450°C	450°C
Vel. de calentamiento	Temp. final	Tiempo de cocción
55-80°C/min.	830°C	1-2 min.

Instrucciones para el uso de Carrara Interaction action i-dentin

Indicación: El surtido de masas action i-dentin le permite dar un aspecto más natural a sus restauraciones Carrara Interaction. Dependiendo del efecto cromático deseado, se pueden utilizar las masas puras, con transpa, incisal, xtra incisal, dentin o action i-denti. **Contraindicaciones:** No apto para masas Antagon Interaction ni Sakura Interaction. **Uso:** Utilice el Shadeguide para elegir el efecto cromático deseado. Mezcle la masa correspondiente con Carving Liquid hasta lograr una consistencia cremosa, y aplíquela capa por capa. Los colores action i-dentin se cuecen en la primera o segunda fase de cocción de dentina, según corresponda con el espectro de indicaciones. Los colores son iguales a los antiguos de Individual Colors.

Carrara Interaction action i-dentin



action i-dentin



Art.Nr:

Carving liquid 50 ml	224008830
Shadeguide action i-dentin	486500060
221 Sunny	482628221
222 Camel	482628222
223 Toffee	482628223
224 Cashmere	482628224
225 Corn	482628225
226 Butter	482628226
227 Honey	482628227
228 Caramel	482628228
229 Amber	482628229
230 Mocca	482628230
231 Chocolate	482628231
232 Creme	482628232
233 Sand	482628233
234 Ivory	482628234
235 Sahara	482628235
236 Marble	482628236
237 Khaki	482628237
238 Polar	482628238
239 Lavender	482628239
240 Aqua	482628240

paste opaque	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
opaque dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
action i-dentin	1A2		3A4			1B2		3B4		1C2		3C4		1A2	1B2	1C2
	221 - 240 (for individual use)															
xtra incisal	x-tra i blue/x-tra i red/x-tra i grey/x-tra i orange/x-tra i clear															
	x-tra i bright/x-tra i medium/x-tra i dark															
incisal	58	59	60	57	59	60	59	60	59	60	59	60	59	60	59	60

Elephant Dental B.V.
Verlengde Lageweg 10
1628 PM Hoorn, The Netherlands
Tel. +31 229 25 90 00
Fax +31 229 25 90 99
E-mail info@elephant.nl
www.elephant-dental.com

Type 1 dental ceramic
Made in Holland
ISO 9693 + ISO 6872

Elephant



dental health products

Rx only CE 0344 01-oct-2005

Carrara Interaction action i-dentin

Carrara Interaction action i-dentin