



1 *paste opaque* aplicada



2 Aplicación de la *opaque dentin*



3 *dentin* reducida (cutback)

Estratificación individual de Sakura Interaction




4 *action i-dentin* aplicada



5 Aplicación de las diversas *x-tra incisals*



6 Aplicación de *incisal* en el contorno

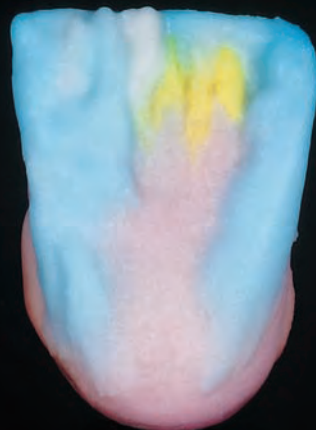

7 Estratificación *incisal* "en sandwich"



8 Cubierto totalmente con *incisal*




9 Cobertura palatina

StratoPlus/StratoPress

(Programa de cocción general)

		Opaquer en pasta	1ª Dentine	2ª Dentine	Brillo
Temperatura de precalentamiento o de inicio	(°C)	400	450	450	450
Tiempo de presecado y de precalentamiento	(min)	7	5	4	4
Aumento de temperatura	(°C/min)	60	60	60	60
Temperatura final	(°C)	920	850	845	810
Tiempo de mantenimiento con vacío	(min)	1	1	1	
Tiempo de mantenimiento sin vacío	(min)	1	1	1	1,5
Temp. de inicio del vacío	(°C)	400	450	450	-
Temp. final del vacío	(°C)	920	850	845	-

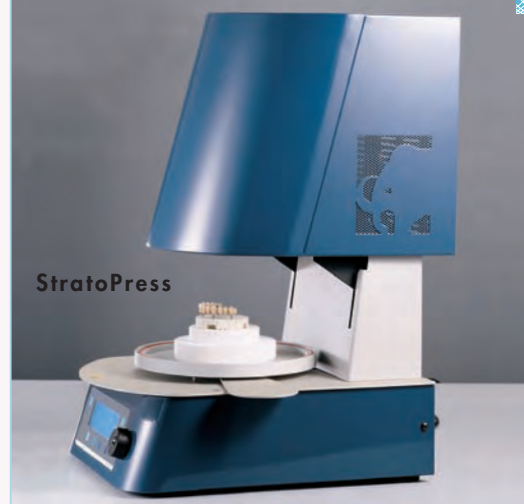

Observación importante:


Las temperaturas de cocción mencionadas son valores indicativos que pueden variar dependiendo del horno utilizado. Por lo tanto, es posible que sea necesario adaptar dichas temperaturas.

Elección de la subestructura (indicación):

Sakura Interaction es una cerámica de bajo coeficiente de expansión y bajo punto de fusión para el recubrimiento de subestructuras de óxido de circonio. Sakura Interaction se puede utilizar fácilmente para recubrir subestructuras de óxido de circonio con un coeficiente de expansión térmica de entre 10,0 y 10,6 $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$ (25-500°C).

Contraindicación:

No utilizar en caso de alergia conocida a uno de los componentes.

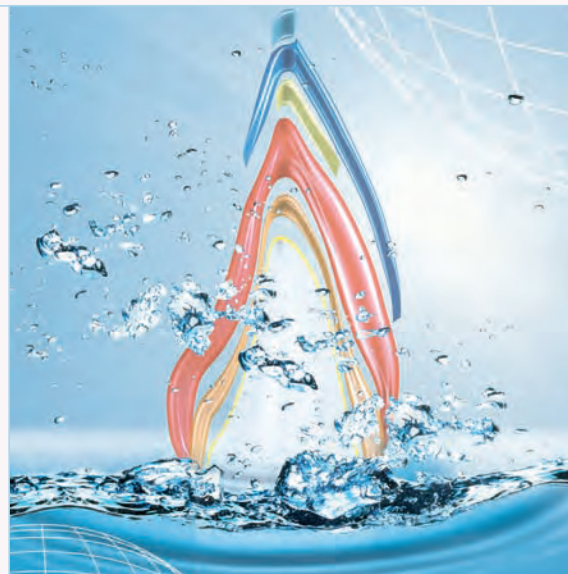

Preparación de la subestructura:

Para la preparación de las subestructuras deben seguirse las instrucciones del manual del fabricante.

paste opaque	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
opaque dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
action i-dentin	1A2	3A4			1B2	3B4		1C2	3C4		1A2	1B2	1C2			
x-tra incisal	x-tra i blue/x-tra i red/x-tra i grey/x-tra i orange/x-tra i clear															
	x-tra i bright/x-tra i medium/x-tra i dark															
incisal	58	59	60	57	59	60	59	60	59	60	59	60	59			

Elephant Dental B.V.
Verlengde Lageweg 10
1628 PM Hoorn, Holanda
Tel. +31 229 25 90 00
Fax +31 229 25 90 99
E-mail export@elephant.nl
www.elephant-dental.com

Elephant



dental health products

Tipo 1 cerámica dental Made in Holland ISO 6872

CE 0344 01-mar-2005