



1 *paste opaque* applicato



2 Applicazione della *opaque dentin*



3 *dentin* dopo l'asportazione (cutback)

Schema Antagon Interaction per una struttura a strati personalizzata



4 *action i-dentin* applicata



5 Applicazione della massa *x-tra incisals*



6 Applicazione della massa *incisal*



7 Struttura incisale a "sandwich"



8 Applicazione completa con *incisal*




9 Corona lucida finita



Istruzioni d'uso Antagon Interaction

Istruzioni d'uso Antagon Interaction

StratoPlus/StratoPress (programma di cottura generale)	1a fase di cottura opaco in pasta	2a fase di cottura opaco in pasta	Fase di cottura massa per spalle	1a fase di cottura dentina	2a fase di cottura dentina	Fase di cottura glasure	Fase di cottura massa correttiva
Temperatura di preriscaldamento risp. iniziale: (°C)	400	400	500	500	500	500	500
Tempo di pre-essiccazione e preriscaldamento: (min)	7	7	4	5-7	3-5	4	3-5
Velocità di salita: (°C/min)	60	60	60	60	60	60	60
Temperatura finale: (°C)	915	910	895	895	890	885	830-850
Tempo di mantenim. (min)	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
Temp. iniziale vuoto: (°C)	400	400	500	500	500	-	500
Temp. finale vuoto: (°C)	915	910	895	895	890	-	830-850

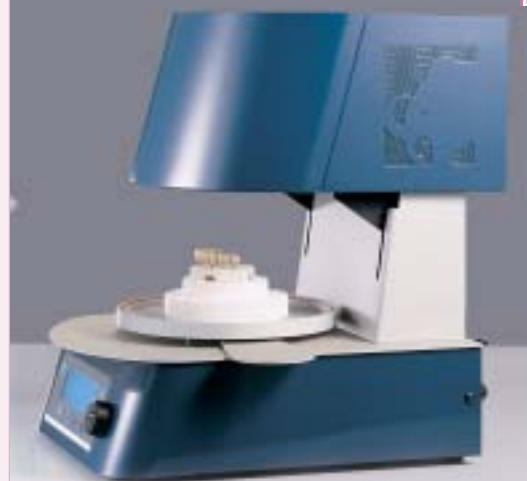

StratoPlus

**Antagon Interaction:**

Si può utilizzare con tutte le leche che hanno un valore WAK compreso da 13.8 sino a 14.9  $\mu\text{m}/\text{m.K}$  (25-500°C).


Raffreddamento **veloce** sino a 14.0  $\mu\text{m}/\text{m.K}$  - **0 min.**

Raffreddamento **normale** sino a 14.3  $\mu\text{m}/\text{m.K}$  - **2 min.**

Raffreddamento **lento** sopra a 14.4  $\mu\text{m}/\text{m.K}$  - **5-7 min.**

**Importante:**

Le temperatura di cottura sono indicative e possono avere delle minime variazioni, con altri forni, e devono essere corrette.

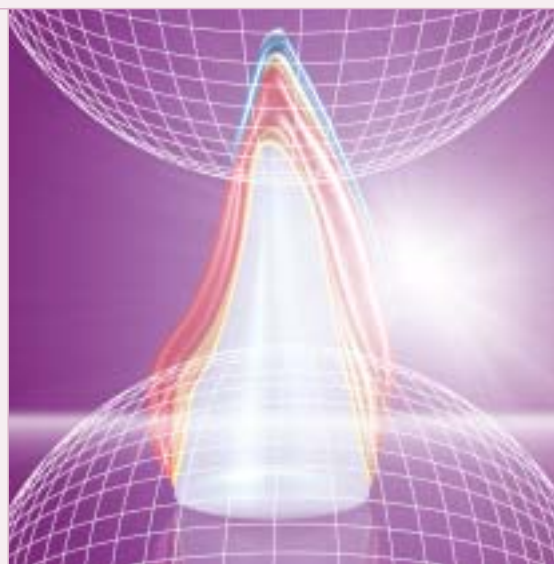

Legna	WAK (25-500°C)	Raffreddamento con Anlagon Interaction
Orion UX	13,8	Veloce (0 min.)
Orion WX	13,8	Veloce (0 min.)
Orion Vesta	13,8	Veloce (0 min.)
Bermudent H	14,0	Veloce (0 min.)
Orion UX Plus	14,1	Normale (2 min.)*
Orion UWX	14,1	Normale (2 min.)*
Orion GX	14,1	Normale (2 min.)*
Orion Isis Plus	14,2	Normale (2 min.)*
Biogold Plus	14,3	Normale (2 min.)#
Bermudent Y	14,3	Normale (2 min.)#
Biogold AN	14,3	Normale (2 min.)#
Orion E	14,4	Lento (5 min.)
Orion Virgo P	14,5	Lento (5 min.)
Orion Argos	14,7	Lento (7 min.)

\* O, se non è possibile: veloce # O, se non è possibile: lento

paste opaque	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
opaque dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
action i-dentin	1A2	3A4			1B2	3B4	1C2	3C4	1A2	1B2	1C2					
x-tra incisal	x-tra i blue/x-tra i red/x-tra i grey/x-tra i orange/x-tra i clear															
	x-tra i bright/x-tra i medium/x-tra i dark															
incisal	58	59	60	57	59	60	59	60	59							

**i** Per ulteriori informazioni rivolgersi al concessionario di zona.

Elephant Dental B.V.  
Verlengde Lageweg 10  
1628 PM Hoorn, Paesi Bassi  
Tel: +31 229 25 90 00  
Fax: +31 229 25 90 99  
E-mail: export@elephant.nl  
www.elephant-dental.com

**Elephant**

dental health products

CE 0336 01-jun-2004