

# La gamme de duplication Elephant.



Quand un seul original ne suffit pas !

Le système de duplication d'Elephant constitue la meilleure solution pour la réalisation d'un second « original ».



Cuvette de duplication pour silicone et gel.



Et pour les passionnés de la vitesse : Silflex Orange Speed !

Elephant



dental health products

Une gamme de duplication à prix abordables, pour les petits comme pour les grands consommateurs.

# Une gamme de duplication à prix abordables.

## Matériaux de duplication silicone pour petits consommateurs.

Silflex, une silicone par addition biocomposant de haute précision, convient parfaitement pour la duplication de modèle en revêtement réfractaire à liant phosphate tels que le PH1 et PH2 pour la réalisation de dispositifs dentaires amovibles à châssis métalliques et armatures combinées. Par leurs excellentes propriétés et une fluidité inégalable, les trois matériaux convainquent pour une reproduction rapide et fidèle dans les détails des maîtres modèles.

### Silflex Pink (30 min.)



14 shore

D'une dureté shore moyenne de 14 shore, il convient à un usage universel surtout pour des modèles à grande zone de contre dépouille.

### Silflex Orange Speed (8 min.)



15 shore

Suite à sa prise rapide, avantage le gain de temps. Il est aussi préconisé pour la duplication de modèle à moignon réfractaire.

### Silflex Blue (30 min.)




25 shore

Le meilleur choix pour la duplication de travaux combiné avec couronnes télescopiques nécessitant une haute précision.

## Matériaux gel de duplication hydrocolloïde pour grands consommateurs.

Grâce à la gamme de matériaux gel de duplication Elephant, nous vous offrons des produits permettant de réaliser des modèles réfractaires à liant phosphate et en silicate d'éthyle pour les châssis métalliques ainsi que la reproduction de modèle en plâtre. Pour les grands consommateurs le produit réversible avantageux à base de agar-agar peut être refondu jusqu'à 15 fois.

### Perflex

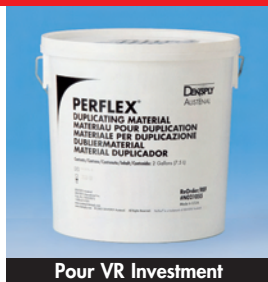

Pour VR Investment

Pour obtenir un modèle de revêtement à surface optimale, nous conseillons de prétraiter la forme de duplication avec le revêtement fin Protective Coat.

Pour la duplication avec Perflex, le revêtement silicate d'éthyle VR Investment convient à merveille.

### Cruta Gel



Pour VR Investment et PH3

Facile d'utilisation et de forme stable, le Cruta Gel s'utilise aussi bien avec les revêtements à base de silicate d'éthyle et phosphate tels que le PH3.

### Polyflex



Pour PH3 et plâtre

Le gel de duplication Polyflex convient parfaitement pour les revêtements à base de phosphate PH3 pour la réalisation de châssis métalliques et châssis combinés.

Elephant



dental health products

À la base de votre réussite.

Elephant Dental B.V.  
Verlengde Lageweg 10  
1628 PM Hoor, Pays-Bas  
Tel. +31 229 25 90 00  
Fax +31 229 25 90 99  
E-mail [export@elephant.nl](mailto:export@elephant.nl)  
[www.elephant-dental.com](http://www.elephant-dental.com)

rev. oct-2007