


Het Elephant dupliceerassortiment.



Als één origineel niet voldoende is!

Het dupliceersysteem van Elephant is de beste oplossing voor het maken van een tweede 'origineel'.

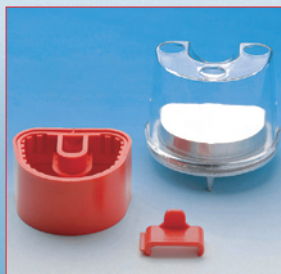

Dupliceercuvetten voor silicone en gel.



Voor snelheidsmaniakken Silflex Orange Speed!

Elephant



dental health products

Een betaalbaar dupliceerassortiment voor zowel klein- als grootverbruikers.

Een betaalbaar dupliceerassortiment.

Siliconenduplicieermateriaal voor kleinverbruikers.

Silflex additie tweecomponenten-preciesduplicieersilicone is zeer geschikt voor gebruik in combinatie met fosfaatgebonden inbedmassa's zoals PH1 en PH2 ter vervaardiging van klammer- en combinatieframestukken. Alle drie de siliconenmaterialen overtuigen door uitstekende eigenschappen, zoals snel vormherstel, gedetailleerde afvorming en perfecte vloeieigenschappen.

Silflex Pink (30 min.)



14 shore

Met een gemiddelde shorewaarde van 14 shore universeel te gebruiken, ook bij ondersneden preparaties.

Silflex Orange Speed (8 min.)



15 shore

U bespaart kostbare tijd, wat vooral bij het vervaardigen van vuurvaste stempelen ten behoeve van volledig keramische objecten, een groot voordeel is gebleken.

Silflex Blue (30 min.)



25 shore

De beste keuze voor het vervaardigen van combinatie- en telescoopwerkstukken, waarbij hoge precisie een vereiste is.

Gelduplicieermateriaal voor grootverbruikers.

Met het Elephant assortiment gelduplicieermaterialen kan voor klammer- en combinatieframes zowel met fosfaat- en ethylsilicaatgebonden inbedmassa's als met gips gewerkt worden. Het reversibele duplicieermateriaal (tot 15 keer hersmeltbaar) op basis van agar-agar kan continu worden gebruikt, wat met name voor grootverbruikers veel voordelen heeft.

Perflex



Voor VR Investment

Voor een inbedmassamodel met een optimaal oppervlak adviseren wij om de duplicievorm voor te behandelen met de fijninbedmassa Protective Coat.

Voor het dupliceren met Perflex is de ethylsilicaatinbedmassa VR Investment uitstekend geschikt.

Cruta Gel



Voor VR Investment en PH3

De vormstabele Cruta Gel is makkelijk in het gebruik en kan zowel worden gecombineerd met ethylsilicaatinbedmassa als met fosfaatgebonden inbedmassa's zoals PH3.

Polyflex



Voor PH3 en gips

Polyflex is een gelduplicieermateriaal dat zeer geschikt is om te worden gebruikt in combinatie met de fosfaatgebonden inbedmassa PH3 voor het maken van klammer- en combinatieframes.

Elephant



dental health products

Wij ondersteunen uw succes.

Elephant Dental B.V.
Verlengde Lageweg 10
1628 PM Hoor
Tel. +31 229 25 90 00
Fax +31 229 25 90 99
E-mail info@elephant.nl
www.elephant-dental.com